skySmile

Bleaching-Gel

Wirkstoff: Carbamid-Peroxid (Konzentration siehe Spritze)

Anwendungsgebiet: Aufhellung verfärbter vitaler Zähne. Zum Einsatz mittels Tiefziehschienen. Darf nur nach Konsultation eines Zahnarztes angewendet werden.

Kontraindikation: Während der Schwangerschaft oder der Stillzeit. Bei Allergien gegenüber Wasserstoffperoxiden oder anderen Produktebestandteilen. Bei extrinsischen Verfärbungen, die leicht durch eine professionelle Zahnreinigung entfernt werden können. Bei starken Rauchern, ausser wenn sie während der Tragedauer der Schienen nicht rauchen.

Warnhinweise: skySmile Bleaching-Gel enthält Carbamid-Peroxid, welches Irritationen hervorrufen kann. Kontakt mit Schleimhäuten, Augen und Haut vermeiden. Im Fall eines Kontakts mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht bei Personen unter 18 Jahren anwenden.

Nebenwirkungen: Gelegentlich erhöhte Empfindlichkeit der Zähne, in seltenen Fällen: schmerzhafte Empfindlichkeit der Zähne, Fleckenbildung auf den Zähnen, Irritationen des Zahnfleisches, Würgreiz durch die Tiefziehschienen, Geschmacksveränderung, bei Verschlucken eventuell Magenverstimmung, Kopfschmerzen. Die Nebenwirkungen sind vorübergehender Natur und flauen 1 - 3 Tage nach Beendigung der Anwendung von alleine wieder ab.

Zusammensetzung: Glycerin, Carbamide Peroxide, Carbomer, Disodium Pyrophosphate, Sodium Stannate, Dipotassium EDTA, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Tromethamine, Aroma.

Aufbewahrung: Kühl und trocken lagern.

Lot.-Nr. und Haltbarkeit: siehe Spritze

skySmile®

skySmile AG
Mühlebachstrasse 2
8008 Zürich/Schweiz
www.skysmile.com




skySmile®

Anwendungshinweise
Home-Bleaching

In 7 Schritten zu Ihrem skySmile

Die Anwendung des skySmile Home-Bleachings ist einfach und unter Berücksichtigung der folgenden Punkte sicher und effizient:

1 Zähne putzen

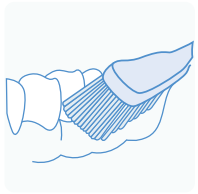

Die Zähne vor jeder Anwendung des skySmile Home-Bleachings putzen und mit Zahnseide die Zahnzwischenräume reinigen.

2 Bleaching-Gel einfüllen




Drehen Sie die Verschlusskappe der Bleaching-Spritze ab und füllen Sie das Bleaching-Gel in die Schienen. Geben Sie je einen Tropfen pro zu behandelnden Zahn in die Schienen - die Schienen nicht zu stark befüllen. Der Inhalt einer Spritze reicht für mindestens 3 - 5 Anwendungen. Die Bleaching-Spritzen sollten Sie kühl aufbewahren.

3 Schienen einsetzen



Die mit Gel gefüllten Schienen in den Mund einführen und über die zu bleichenden Ober- und Unterkieferzähne aufsetzen.

4 Überschüssiges Gel entfernen

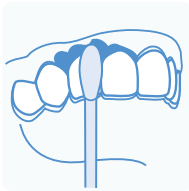

Es ist wichtig, dass Sie überschüssiges Gel, welches aus den Schienen herausdrückt, mit den Fingern, einer Zahnbürste oder einem Wattestäbchen vom Gaumen und der Mundschleimhaut entfernen. Bleaching-Gel nicht schlucken!

5 Bleaching



Nun werden Ihre Zähne aufgehellt. Die aufgesetzten Schienen in der Nacht oder am Tag tragen. 10% CP mind. 4 Stunden, 16% CP mind. 3 Stunden. Das Bleaching-Gel ist sechs Stunden aktiv. Während der Tragezeit der Schienen nicht essen, trinken oder rauchen.

6 Nach der Behandlung



Nach der Behandlung die Schienen entfernen, jegliches Restgel aus dem Mund spülen und die Zähne gut putzen. Die Schienen mit kaltem Wasser gründlich reinigen und trocknen. Das Bleaching kann vorübergehend zu erhöhter Empfindlichkeit der Zähne führen. Ein fluoridhaltiges Zahngel lindert diese Empfindlichkeit.

7 Bleaching wiederholen



Der normale Behandlungszeitraum beträgt ein bis zwei Wochen und endet, sobald Sie Ihre gewünschte Zahnfarbe erreicht haben. Bei auftretender Empfindlichkeit raten wir Ihnen, zwischen den Behandlungen jeweils einen Tag auszusetzen. Pflegen Sie Ihre Zähne in dieser Zeit, indem Sie Ihre Schienen gefüllt mit fluorhaltigem Zahngel für ein paar Stunden tragen. Direkt nach der Bleaching-Behandlung sind Ihre Zähne während zwei Stunden empfänglich für Farbpigmente. In dieser Zeit sollten Sie auf stark färbende Esswaren und Getränke verzichten. Das Gleiche gilt für farbige Zahnspülungen und -gels. Zudem sollten Sie direkt nach dem Bleaching nicht rauchen!

Wünschen Sie eine Auffrischung?

Ihr Lachen ist unsere beste Werbung! Ihr skySmile bleibt Ihnen lange erhalten. Unseren Erfahrungen zufolge bleiben die Zähne bis zu 2 Jahre strahlend weiss. Sobald Sie es wünschen, können Sie die Anwendung jederzeit wiederholen. Die dazu notwendige skySmile Nachfüllpackung mit Spritzen können Sie einfach und günstig über www.skysmile.com nachbestellen.